
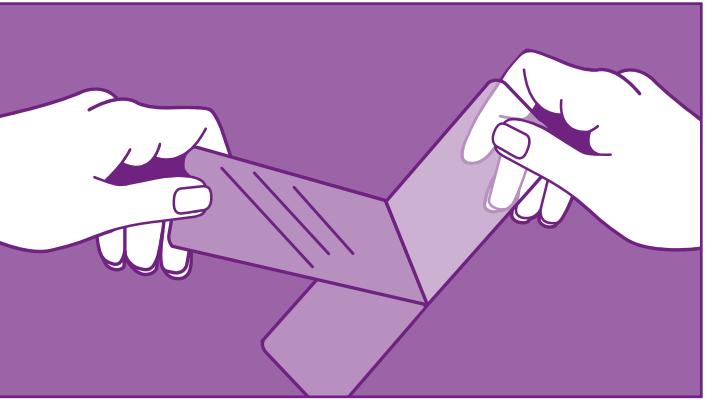


INSTRUCTIONS FOR USE

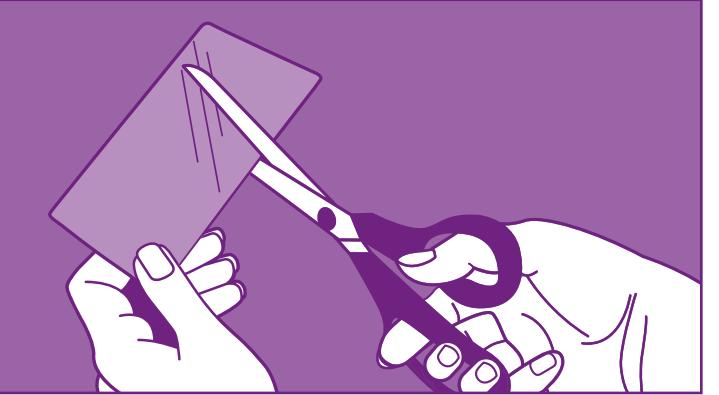

EN

Name
BAPSCARCARE T silicone sheets.

Product description

- BAPSCARCARE T is a proven technology for the treatment of scars (hypertrophic and keloid) and for the prevention of abnormal scar development after surgery or injury.
- BAPSCARCARE T is a self-adhesive, thin, transparent silicone sheet with high adhesive strength, which ensures that it remains securely in place on any area of the body requiring treatment. Suitable for use under clothing.

Composition

- Polyurethane film
- Medical grade silicones

Characteristics

- BAPSCARCARE T silicone sheets ensure that scars become flatter, more flexible and thinner and that complaints (persistent redness, 'pulling' sensations, itching, restriction of joint movement, discomfort and cosmetic concerns) are reduced.
- The silicone sheet creates a semi-occlusive (covering) layer on top of the skin, which results in increased hydration of the skin (epidermis). The increased hydration ensures that damaged, scarred skin recovers more quickly and functional problems (complaints) are reduced.

Indications/applications

BAPSCARCARE T silicone sheets are suitable for:
- both old and new scars
- all skin types
- all ages
- the treatment and prevention of abnormal scars (hypertrophic and keloid)
- the treatment of burn scars
- the treatment of surgical scars
- use under clothing and in compression therapy
- the treatment of persistent functional complaints caused by the scar (persistent redness, 'pulling' sensations, itching, restriction of joint movement, discomfort and cosmetic concerns)

Instructions for use

- For an optimal result it is best to start using BAPSCARCARE T silicone therapy immediately after wound closure (after sutures have been removed and any scars have disappeared).
- If necessary, the BAPSCARCARE T silicone sheet can be cut to size.
- Make sure that the silicone sheet covers the scar and a 2cm-wide area around it.
- To ensure good adhesion and durability of the silicone sheet, it is advisable to remove any hair around the scar location.

- Start the treatment again and let the skin get used to the BAPSCARCARE T silicone sheet more gradually (one hour longer every day).
- If the skin problems persist, consult your therapist/doctor.

- If there are any serious adverse events related to the product, these should be reported to the manufacturer and the competent authorities (of the Member State) where the user is located.

apply the next section of the silicone sheet to the scar. Depending on the size of the silicone sheet, the above must be repeated until the entire silicone sheet is applied.

- If necessary, the silicone sheet can be fixed in place with an adhesive or elastic bandage.

- The skin may be treated with a hydrating cream after removal of the silicone sheet.

Care instructions

- The BAPSCARCARE T silicone sheets are for single use and can be left on the scar for several days.
- Replace the silicone sheet with a new one as soon as the adhesive strength decreases significantly.

How long should I use BAPSCARCARE T silicone sheets?

- It takes at least 3-6 months for a scar to normalise.
- You should use BAPSCARCARE T as long as the scar is raised, red or giving rise to complaints.
- Consult your therapist/doctor about the duration of therapy.

Duration of use

- Each pack of BAPSCARCARE T contains 1 or more silicone sheets, each of which can be used for 5 to a maximum of 7 days.
- For long-term therapy, several packs may therefore be necessary.

Special attention and precautions

- Keep out of reach of children.
- BAPSCARCARE T silicone sheets are only suitable for external use.
- Only use BAPSCARCARE T silicone sheets on healed, closed skin (after scars have disappeared) and never on open wounds.
- Do not use if you are hypersensitive to any of the ingredients.
- Do not use if the packaging is damaged when you receive the product.

Side effects

- In rare cases, the skin may react hypersensitively (skin irritation) to silicone treatment. In such cases, stop the treatment until the skin has calmed down.

- Start the treatment again and let the skin get used to the BAPSCARCARE T silicone sheet more gradually (one hour longer every day).

- If the skin problems persist, consult your therapist/doctor.

- If there are any serious adverse events related to the product, these should be reported to the manufacturer and the competent authorities (of the Member State) where the user is located.

Storage

- The expiry date is stated on the packaging.
- Thoroughly clean and dry the skin before applying the silicone sheet on and around the scar.

- Remove the first part of the protective film of the silicone sheet and carefully apply the self-adhesive silicone sheet, starting at the edge of the scar.
Remove the second part of the protective film and

January 2021

Date of last revision of the instructions for use

January 2021

NL

Benaming
BAPSCARCARE T siliconenverband.

Productbeschrijving

- BAPSCARCARE T is een bewezen technologie om littekens (hypertrofie en keloid) te behandelen en om de chirurgie of ongeval afwijkende littekenvorming te voorkomen.

- BAPSCARCARE T is een zelfklevend, dun en transparant siliconenverband met een hoge kleefkracht, waardoor het goed blijft zitten op alle te behandelen plaatsen van het lichaam.

Geschikt bij gebruik onder kleding.

Samenstelling

- Polyurethanen film
- Siliconen van Medische kwaliteit

Eigenschappen

- BAPSCARCARE T siliconenverbanden zorgen ervoor dat littekens vlakker, soepeler en dunner worden en dat klachten (aanhoudende roodheid, trekken van het litteken, jeuk, bewegingsbeperking aan gewrichten, ongemak en cosmetische bezwaren) afnemen.

- Het siliconenverband zorgt voor een semi-occlusieve (afdekende) laag bovenop de huid, waardoor een verhoogde hydratatie van de huid (epidermis) ontstaat. De verhoogde hydratatie zorgt ervoor dat de beschadigde littekeneindhuid zich versneld herstelt en functionele bezwaren (klachten) afnemen.

Indicaties/toepassingsgebieden

BAPSCARCARE T siliconenverbanden zijn geschikt voor:

- zowel oude als nieuwe littekens
- alle huidtypen
- alle leeftijden
- de behandeling en het voorkomen van afwijkende littekens (hypertrofisch en keloid).
- de behandeling van brandwondenlittekens.
- de behandeling van chirurgische littekens.
- gebruik onder kleding en compressietherapie
- de behandeling van aanhoudende functionele bezwaren veroorzaakt door het litteken, jeuk, bewegingsbeperking aan gewrichten, ongemak en cosmetische bezwaren.

Speciale aandacht en voorzorg

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- De BAPSCARCARE T siliconenverbanden zijn enkel geschikt voor uitwendig gebruik.

- Gebruik BAPSCARCARE T siliconenverbanden enkel op de gesloten huid (na verwijderen van de korst) en nooit op open wonden.

- Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen.

- Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is bij ontvangst van het product.

- Bijwerkingen

- In zeldzame gevallen kan de huid overgevoelig reageren (huidirritatie) op een siliconenverband. Stop dan met de behandeling totdat de huid rustig is geworden.

- Start opnieuw met de behandeling en laat de huid langzamer aan het BAPSCARCARE T siliconenverband wennen (elke dag een uur langer).

- Indien de huidproblemen aanblijven, raadpleeg dan de behandelaar/arts.

- Indien er ernstige voorvalen zijn in verband met het hulpmiddel, moeten deze gemeld worden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten (van de lidstaat) waar de gebruiker gevestigd is.

- Bewaren

- De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld.

- BAPSCARCARE T siliconenverband is in de ongeopende zakjes 5 jaar te bewaren.

- Bewaren bij kamertemperatuur of ten minste niet bij temperaturen hoger dan 25°C.

- Datum van de laatste revisie van de gebruiksaanwijzing

Januari 2021

DE

Bezeichnung
BAPSCARCARE T Silikonverband.

Produktbeschreibung

- BAPSCARCARE T ist eine bewährte Technologie, um Narben (hypertrophe Narben und Keloid) zu behandeln und um nach einer Operation oder einem Unfall eine auffällige Narbenentwicklung zu vermeiden.

- BAPSCARCARE T ist ein selbstklebender, dünner und transparenter Silikonverband mit hoher Haftfähigkeit, die sicherstellt, dass der Verband an allen zu behandelnden Körperteilen gut anhaftet.

- BAPSCARCARE T ist zum Gebrauch unter Kleidung geeignet.

Zusammensetzung

- Polyurethanen film

- Medizinisches Silikon

Eigenschaften

- BAPSCARCARE T Silikonverbände sorgen dafür, dass Narben flacher, weicher und dünner werden und dass Beschwerden (anhaltende Rötungen, Spannungsgefühl, Juckreiz, eingeschränkte Beweglichkeit der Gelenke, Unbehagen und kosmetische Beschwerden) abnehmen.

- Der Silikonverband ruft durch Abdeckung der Hautoberfläche einen Semi-Oklusionseffekt hervor, der zu einer verstärkten Hydratation der Haut (Epidermis) führt. Durch die verstärkte Hydratation wird die Heilung des beschädigten Narbengewebes beschleunigt, und funktionelle Beschwerden werden verringert.

Spezielle Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- BAPSCARCARE T Silikonverbände sind geeignet für:

- Sowohl alte als auch neue Narben

- Alle Hauttypen

- Alle Altersgruppen

- Behandlung und Vorbeugung von auffälligen Narben (hypertrophe Narben oder Keloid)

- Behandlung von Verbrennungsnarben

- Behandlung von Narben nach chirurgischen Eingriffen

- Verwendung unter Kleidung und bei Kompressionstherapie

- Behandlung persistierender funktioneller Beschwerden, die durch die Narbe verursacht werden (z. B. anhaltende Rötungen, Spannungsgefühl, Juckreiz, eingeschränkte Beweglichkeit der Gelenke, Unbehagen und kosmetische Beschwerden),

Gebrauchsanweisung

- Eine Verpackung BAPSCARCARE T besteht aus mehreren Siliconenverbänden, die jeweils 5 bis maximal 7 Tage lang brukbaar bleiben.

- Bei langdauernde Therapien können mehrere Verpackungen nötig sein.

- Einzelne Packungen müssen abgetrennt werden.

- Der Silikonverband ruft durch die Behandlung der Narbe eine verstärkte Hydratation der Haut (Epidermis) hervor, die die Narbe wieder beruhigt.

- Starten Sie die Behandlung erneut und lassen Sie die Haut langsamer an den BAPSCARCARE T Silikonverband gewöhnen (jeden Tag eine Stunde länger).

- Falls nötig, kann der BAPSCARCARE T Silikonverband auf die geschlossene Narbe (nach dem Lösen der Kruste) und niemals auf offenen Wunden.

- Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

- Nicht anwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, wenn Sie das Produkt erhalten.

Nebenwirkungen

- In seltenen Fällen kann die Haut überempfindlich auf eine Silikonbehandlung reagieren (Hautreizung). Setzen Sie die Behandlung ab und lassen Sie die Haut wieder beruhigen.

- Starten Sie die Behandlung erneut und lassen Sie die Haut langsamer an den BAPSCARCARE T Silikonverband gewöhnen (jeden Tag eine Stunde länger).

- Solchen Hautreaktionen bestehen Bleibend, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Therapeuten.

- Wenn schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Hilfsmittel auftreten, müssen diese dem Hersteller und den zuständigen Behörden (des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer ansässig ist) gemeldet werden.

Aufbewahrung

- Das Halbwertsdatum steht auf der Verpackung.

- Der BAPSCARCARE T Silikonverband kann 5 Jahre in ungeöffneten Beuteln aufbewahrt werden.

- Aufbewahren bei Zimmertemperatur, aber keinesfalls bei Temperaturen über 25 °C.

Datum der letzten Prüfung der Gebrauchsanweisung

Januar 2021

FR

Dénomination

BAPSCARCARE T pansement siliconé.

Description du produit

- BAPSCARCARE T est issu d'une technologie prouvée dans le traitement des cicatrices (hypertrophiques et chéloïdes) et dans la prévention du développement de cicatrices atypiques après chirurgie ou un accident.

- BAPSCARCARE T est un pansement siliconé autocollant, fin et transparent au pouvoir adhésif élevé qui reste bien en place à tous les endroits à traiter du corps. Il est indiqué pour une utilisation sous les vêtements.

Composition

- Film de polyuréthane

- Silicones de qualité médicale

Propriétés

- Les pansements siliconés BAPSCARCARE T aplatiscent, assouplissent et affinent les cicatrices et réduisent les symptômes (rougeurs persistantes, tiraillements de la cicatrice, démangeaisons, limitations articulaires, gêne et préjudices esthétiques).

- Le pansement siliconé assure une couche semi-occlusive (couvrante) sur la peau, favorisant ainsi une meilleure hydratation de la peau (épiderme). L'hydratation accélère l'guérison de la peau cicatricielle abimée et réduit les symptômes fonctionnels (douleurs, etc.).

- Les pansements siliconés BAPSCARCARE T sont indiqués pour :

- les cicatrices anciennes ou récentes

- tous les âges

- le traitement et la prévention des cicatrices atypiques (hypertrophiques et chéloïdes).

- le traitement des cicatrices de brûlures.

- le traitement des cicatrices chirurgicales.

İsim

BAPSCARCARE T silikon bant

Ürün tanımı

- BAPSCARCARE T (hipertrofik ve keloid) nedbe dokularının tedavisinde ve cerrahi işlem veya kazanın sonrasında anomral nedbe dokusu gelişimin önlenmesinde kanıtlanmış bir teknolojidir.
- BAPSCARCARE T yüksek yaşına sahip, kendinden yaşanan,ince ve şeffaf silikon bantları, bant bu sayede vücudun tedavi edilecek tüm bölgelerde yapıtı yere iyi tutunur. Kıyafet altı kulanına uygundur.

Bileşim

- Poliüretan film
- Tibbi kalitede silikon

Özellikleri

- BAPSCARCARE T silikon bantlar nedbe dokularını daha düz, daha az belirgin ve daha ince hale getirir ve yakınlamaları (devam eden kızarıklık, nedbe dokularının gerginliği, kaşın, eklem hareketlerini sınırlılaştırır).
- Bu silikon bant cildin üzerinde yarı örtücü (kaputlu) bir tabaka oluşturur ve bu sayede cildin (epidermisin) nem oluşumunu artırır. Artan nem hasar görmüş olan nedbe dokusunun daha çabuk iyileşmesini sağlar ve işlevsel yakınlamaları (şıklayıcıları) azaltır.

Endikasyonları / kullanım alanları

- BAPSCARCARE T silikon bantların aşağıdaki durumlarda kullanılması uygundır:
- Hem eski hem de yeni nedbe dokularında,
 - Tüm cilt tiplerinde,
 - Her yaşta,
 - Anormal nedbe dokularının (hipertrofik ve keloid) tedavisinde ve önlenmesinde,
 - Yanığa bağlı nedbe dokularının (kabuğun kalkmasından sonra) ve asia aksa yaralar üzerinde kullanılmayı.
 - Bileşim maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayın.
 - Ürünlü alındığında paket hasarlıya kullanmayın.
 - Eklem hareketlerinde sınırlı, rahatsızlık ve kosmetik yakınlamalar.

Kullanım şekli

- BAPSCARCARE T silikon tedavisinde en iyi sonucu elde edebilmek için silikon bant tercihen yarının kapanmasından hemen sonra kullanma başlayın (diğerlerinin alınmasından ve versa kabukların kalkmasından sonra).
- BAPSCARCARE T silikon bantlar gereklisi istenilen boyutlarında kesilebilir.
- Nedbe dokunun çevresini 2-3 kadar silikon bantla kapatılmış olmasına dikkat edin.
- Silikon bandın yapısına güvenin ve dayanıklılığını artırmak için uygulama öncesi nedbe dokusunun etrafındaki tüplerin alınması önerilir.
- Silikon bandı kullanmadan önce nedbe dokusunu ve dokunun etrafındaki cildi iyice temizleyip kurulayın.
- Silikon bandın koruyucu folyosunun ilk kısmını çıkarın ve kendiliğinden yapılan silikon bandı nedbe dokunun başlangıç kısmına dikkatle yapıştırın. Koruyucu folyonun ikinci kısmını çıkarın ve silikon bandın bir sonraki kısmını nedbe dokun

Kullanım süresi

- Bir her BAPSCARCARE T paketi bir veya daha fazla silikon bantı içermektedir ve bu bantları her biri 5 ila en fazla 7 gün kullanılabilmektedir.
- Bu nedenle uzun süreli tedavilerde birden fazla paket gerekebilir.

Özel bakım ve önləmələr

- Çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayınız.
- BAPSCARCARE T silikon bant yalnızca harici kullanım içindir.
- Cilt tıptiğinde,
- Her yaşta,
- Anormal nedbe dokularının (hipertrofik ve keloid) tedavisinde ve önlenmesinde,
- Yanığa bağlı nedbe dokularının (kabuğun kalkmasından sonra) ve asia aksa yaralar üzerinde kullanılmayı.
- Bileşim maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayın.
- Ürünlü alındığında paket hasarlıya kullanmayın.
- Eklem hareketlerinde sınırlı, rahatsızlık ve kosmetik yakınlamalar.

- Yan etkiler**
- Cilt nadiren silikon tedavisiye karşı aşırı duyarlı reaksiyon (cilt tıptişi) gösterebilir. Böyle bir durumda ciltteki hassasiyet geçene kadar tedaviyi geçici olarak bırakın.
 - Ciltteki hassasiyet geçtiğinde tedaviye tekrar başlayın ve cildinizin BAPSCARCARE T silikon bantı (her gün bir saat daha uzun kullanarak) yavaş yavaş alıştırın.
 - Cilt sorunlarını devam etmesi halinde hemşire/doktor başvurun.
 - Yardımcı maddeyle ilgili ciddi durumların meydana gelmesi halinde buna bir üretici firma ve kullanımın ikiğet ettiği (üye devletin) yetkili makamlara bildirilmelidir.

Saklama şekli

- Son kullanma tarihi paketin üzerinde yazmaktadır.
- BAPSCARCARE T silikon bant, açılmamış paketlerde 5 yıl süreyle saklanabilir.
- Oda sıcaklığında veya en az 25°C'nin altında muhafaza ediniz.

Kullanım kılavuzunun son revizyon tarihi

Ocak 2021

CN**名称**

BAPSCARCARE T 硅胶贴片

产品描述

-BAPSCARCARE T 硅胶贴片是治疗疤痕（肥厚性疤痕和疤痕疙瘩）和预防术后或意外创伤后形成病理性疤痕的一种成熟技术。

-BAPSCARCARE T 是一种自粘、薄而透明并有极强粘附力的硅胶贴片，可以很好地粘附在身体的每一处。适合在衣服下面使用。

成分-聚氨基酯薄膜
-医用级硅胶**特性**

-BAPSCARCARE T 硅胶贴片可使疤痕变

更加平滑、更柔软、更薄，并有助于减轻症状（皮肤持续发红、结疤、瘙痒、关节活动受限、不适和美容投诉）。

-硅胶贴片在皮肤顶部提供半封闭（覆盖）

皮肤顶，可增加皮肤（表皮）的水合作用。

更强的水合作用确保受损疤痕皮肤更快恢

复，并减少功能问题（投诉）。

适应症/涂敷区域

BAPSCARCARE T 硅胶贴片适用于：

-新旧疤痕

-所有皮肤类型

-所有年龄

-异常疤痕（肥大性疤痕和疤痕）

的治疗和预防。

-烧伤疤痕的治疗。

-治疗手术的疤痕。

-用于衣服下方和压迫疗法

-治疗由疤痕引起的持续性机能障碍

（持续发红、拉扯感、瘙痒、

关节活动受限、不适和化妆品投诉）

使用说明

-为了获得最佳效果，最好在伤口闭合后

（在移除缝线和所有结痂消失后）立即开始

使用BAPSCARCARE T 硅胶疗法。

-如有必要，BAPSCARCARE T 硅胶贴片

可以切割成正确的尺寸。

-确保疤痕周围2 cm的面积被硅胶贴片覆

盖。

-除去疤痕周围的毛发可增加硅胶贴片的粘附性和耐久性。

-在疤痕周围贴附硅胶贴片之前，

彻底清洁并干燥皮肤。

-在疤痕胶贴片护膜的第一部分，

在疤痕开始处小心粘贴自粘硅胶贴片。

-取下护膜的第二部分，将硅胶贴片的下一

TW**品名**

巴普 T 疤痕護理矽膠貼片

描述

- 經實驗證明，巴普 T 疤痕護理矽膠貼片用於治療（肥厚性疤痕和蟹足腫）和預防手術或意外後出現的異常疤痕。
- 巴普 T 疤痕護理矽膠貼片是一種自黏性、輕薄，透明的高黏度矽膠貼片，能確保貼片在治療中不受行動的影響。可用於衣物內側。

成份

- 聚胺基甲酸乙酯薄片
- 医用级硅胶

特性

-巴普 T 疤痕護理矽膠貼片讓疤痕變得更平整、更柔軟、更輕薄，並且減少不適症狀

（持續發紅、疤痕結痂、疤痕長、搔癢、關節活動受限、不適感和妨礙美觀）。

-巴普 T 疤痕護理矽膠貼片是一種自黏性、輕薄，透明的高黏度矽膠貼片，能確保貼片在治療中不受行動的影響。可用於衣物內側。

使用期限

-每包BAPSCARCARE T 含一片或多片矽膠貼片，每片可使用5-7天。

-因此長期使用需要多个包装。

特別注意和預防事項

-應放置在兒童接觸不到的地方。

-BAPSCARCARE T 矽膠貼片仅供外用。

-僅在閉合皮膚上（鱗皮消失後）

使用BAPSCARCARE T 矽膠貼片，切勿將其用于開放性伤口。

-如果對產品的某種成分過敏，請勿使用。

-如果收到產品時發現包裝损坏，請勿使用。

適應症/應用範圍

巴普 T 疤痕護理矽膠貼片適用於：

-新舊疤痕

-所有皮膚類型

-所有年齡層

-治療和避免異常疤痕（肥厚性疤痕和蟹足腫）。

-燒傷疤痕的治療。

-手術疤痕的治療。

-在衣物下方使用及用於加壓治療。

-治療疤痕引起的持續症狀（如：持續泛紅、疤痕拉長、皮膚癢癢、關節活動受限、不適感和妨礙美觀）。

使用說明

-為了獲得最佳效果，傷口閉合後(如：縫合後和結痂脫落後)，應立即使用巴普 T 疤痕護理矽膠貼片治療。

-如有必要，將巴普 T 疤痕護理矽膠貼片裁剪成適合的尺寸。

-剪裁尺寸大於疤痕邊緣約大2公分。

-為了確保矽膠貼片的黏性和持久性，建議去除疤痕周圍的毛髮後再使用。

-請完整清洗並待皮膚乾燥後，在疤痕或疤痕周圍處重新使用此產品。

-撕下矽膠貼片背後的第一層保護膜，

存放

-在包裝上注明了使用有效期。

-BAPSCARCARE T 矽膠貼片可以在未封的袋子中存放5年。

-存放於室溫或至多不高于25°C的溫度下。

使用說明的最近修訂日期

2021年1月

JP**製品名**

BAPSCARCARE Tシリコンケアシート

製品概要

- BAPSCARCARE Tシリコンケアシートは、傷あと（肥厚性疤痕とケロイド）の手当で、怪我や手術後の異常な傷あと形成を予防するための治療済み处方です。
- BAPSCARCARE Tは透明で薄い粘着性シリコンシートで粘着力が強く、身体のあらゆる部分の患部にしっかりと貼り付けることができます。衣服の下の貼付に最適です。

成分

- ポリウレタンフィルム
- 医療用シリコンジェル

特徴

- BAPSCARCARE Tシリコンケアシートは傷あとをより平らで柔軟く薄くする効果があり、継続的な赤み、傷あととの引きつき、かゆみ、関節の動きにくさ、不快感、目に見える瘢痕跡などを和らげる効果があります。

- BAPSCARCARE Tシリコンケアシートは肌を覆う半閉塞性の保護膜を形成し、皮膚（表皮）を高い潤滑状態に保ちます。優れた潤滑効果により、ダメージを受けた傷あとをより早く回復させ症状を緩和させます。

用途/適用範圍

BAPSCARCARE Tシリコンケアシートの以下の場合に適しています。

-古い傷あとから新しい傷あとまで

-全皮膚タイプ

-全年齢

-異なる傷あと（肥厚性疤痕とケロイド）の手当で予防

-火傷による傷あととの手当で

-外科手術後の傷あととの手当で

-衣服の下や湿布療法として

-傷あとが原因の持続的な症候（継続的な赤み、傷あととの引きつき、かゆみ、関節の動きにくさ、不快感、目に見える瘢痕跡）の手当で

特別注意和預防措施

-遠隔孩童可接觸範圍。

-巴普 T 疤痕護理矽膠貼片限外部使用。

-巴普 T 疤痕護理矽膠貼片只能用在舊傷口處（鱗皮掉落後）；請勿在未癒合傷口上使用。

-任何成分過敏，請勿使用。

-收到產品後外包裝破損時，請勿使用。

副作用

-在極少數情況下，皮膚可能對矽膠治療有過敏反應（如皮膚搔癢）。這種情況下立

即停止治療，待皮膚恢復後再開始治療。

-再次開始治療，讓皮膚逐漸適應巴普 T 疤痕護理矽膠貼片（漸進式每日增加一小時）。

-如果皮膚問題持續存在，請諮詢醫師。

-如果有任何產品嚴重問題，請回報給製造商以及（會員國）有關當局。

保存

-包裝上註明